

RECOVERY.M8⁹

BRUGERVEJLEDNING



Tak fordi du handlede hos os!

Vigtigt!



For at reducere risikoen for svigt, elektrisk stød, personskade, brand eller i værste fald død skal du omhyggeligt læse alle instruktioner og advarselstips i denne vejledning inden du bruger dette produkt.

*Advarsel

1. Brug ikke dette produkt fra halsen og op!
2. Brug ikke dette produkt på knogler, men derimod kun på muskel og blødt væv
3. Brug ikke dette produkt hvor du har blå mærker/sår eller anden form for smerter og ubehag.
4. Hold produktet væk fra vand.
5. Hold produktet væk fra ild og anden ekstrem varme.
6. Undgå at tabe produktet, da dette kan skade batteriet.
7. Børn i alderen 6-13 bør kun bruge produktet under opsyn af forældre, eller andre voksne.
8. Undgå at skille produktet ad på nogen måde.
9. Hold fingre, hår osv. væk fra stemplet (spidsen af produktet), da det kan risikere at sidde fast eller komme i klemme.

*Advarsler og påmindelser

1. Hold produktet væk fra væsker og varmekilder. Hold det tørt.
2. Sluk for stikkontakten efter endt opladning.
3. Brug kun dette produkt som anvist i instruktionerne.
4. Det anbefales kraftigt at du kun bruger den originale oplader, som følger med.
5. Undersøg produktet for tydelige skader/fejl inden brug.

*Vigtig information

Dette produkt må ikke bruges i nogle af følgende situationer, uden samtykke fra din læge.

Hvis du er gravid.


Hvis du bruger pacemaker, er nyligt opereret, lider af epilepsi, migræne, eller på anden måde har en diagnose, som kan være relateret til dit helbred.

Hvis du er det mindste i tvivl, så spørg altid din læge, eller andet sundhedsfagligt personale.

Produktbeskrivelse



1. Ventilationssystem.
2. Kraftfuld børsteløs motor, støjsvag teknologi.
3. Indsæt 1 af 6 forskellige massagehoveder, som er lavet til at opfylde alle behov.
4. Genopladeligt lithium-ion batteri. Batteriet kan ikke udskiftes.
5. Display med batteri- og hastighedsindikator, samt tryksensor.
6. Trådløs, let og praktisk. Håndtaget er lavet af silicagel, hvilket er glat og behageligt at holde på.
7. Opladningsstik. Brug kun den oplader der medfølger.

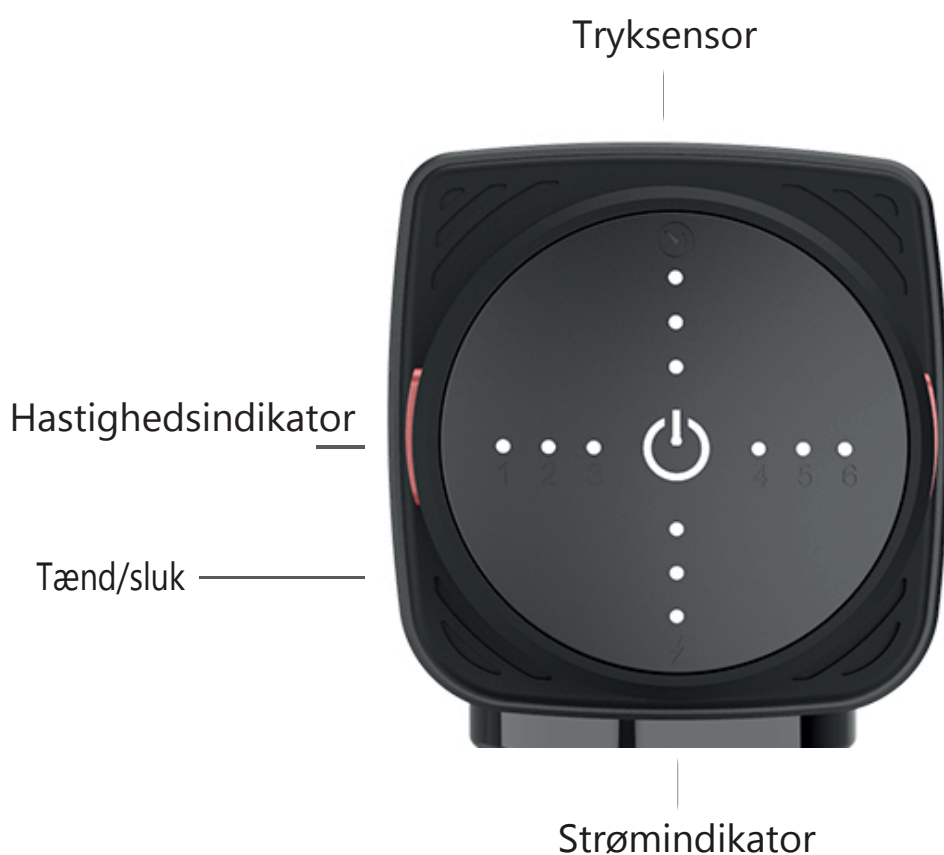

1. Tryksensor: Smart AI chippen registrerer hvor meget tryk der påføres.
2. Hastighedsindikator : Vælg mellem hastighed 1-6.
3. Tænd/sluk knap: Hold knappen i midten af displayet nede i 2 sekunder for at tænde/slukke. Skift hastighed ved korte tryk.
4. Strømindikator: 3 prikker = 70-100%, 2 prikker = 30-70%, 1 prik = 0-30%

Med 6 udskiftelige hoveder



Kugleformet

Specielt godt til all-around overflade /wellness massage, da det er af blødere materiale. Dette gør det også ideelt at bruge ved nakken og andre lidt mere fintfølende områder, som helst ikke skal irriteres/stimuleres for meget.



Rundt stål

Dette massagehoved er perfekt til alle de større muskelgrupper, hvor der godt må slås lidt ekstra hårdt.



Patron

Specielt godt til dybdegående massage/ trigger point. Den spidse form gør at det er ideelt til at ramme meget specifikke steder, og gør det derfor nemmere at bruge i områder hvor der er meget knoglemasse.



Y formet

Specielt godt f.eks. langs rygrad og akillessene. Men kan også med fordel bruges på lår og læg.



Fladt stål

Bruges på samme måde som det runde flade hoved, men er formet anderledes og i andet materiale, så det giver et andet tryk.



Rundt fladt

Specielt godt til de store muskelgrupper som f.eks. lår og baller/glutes, da det er af en hårdere plast end f.eks. det kugleformede og derfor giver et kraftigere tryk.

Specifikationer

Produktnavn	Recoverym8 9°
Batteri Kapacitet	2600mAh
Power	220W
Motor	Støjsvag Børsteløs Motor
Batteritid	Op Til 5 Timer
Hastighed	6 Hastigheder
Nominel Spænding	25.2v
Vægt	1 Kg
Opladningstid	3 Timer

Opladning

1. Før du tager produktet i brug første gang, skal det lade i 3 timer.
2. Når du lader, så brug den originale oplader som medfølger.
3. LED lys i strømindikatoren og laderen viser når produktet oplades.
4. Du kan oplade batteriet ligemeget hvor meget strøm der er tilbage. Produktet kan ikke bruges mens det lader op.
5. Hvor længe en opladning reelt holder, påvirkes af hvilken hastighed du bruger.

Sådan sætter du massagehoveder i/ud

Tag 1 af de 6 forskellige massagehoveder og skub ind til det sidder godt fast. Når du vil skifte hoved, trækker du hovedet ud og indsætter et nyt.



Vedligeholdelse, rengøring, opbevaring og transport

1. Rengør produktet med en fugtig klud eller papir. Brug kun meget lidt vand!
2. Opbevar og transporter i transporttasken som medfølger.
3. Undgå at opbevare produktet fugtige steder, da dette kan beskadige produktet.
4. Bruges produktet ikke over en længere periode, anbefales det at du stadig sørger for at oplade det mindst hvert halve år.

Garanti

Der er et års fuld garanti på produktet. Dette frafalder dog bl.a. hvis:

1. Produktet har taget skade som følge af uansvarlig brug eller opbevaring.
2. Produktet har været skilt ad.
3. Vejledningen om brug og rengøring her i manualen ikke er blevet fulgt.
4. Manglende bevis for købet af produktet (faktura).



IG @Recoverym8 - fb.com/Recoverym8

RECOVERYM8



60 61 23 58

CVR: 41239379

WWW.RECOVERYM8.DK